



BD SafetyGlide™

Sicherheitsinjektionskanülen

Die innovative Lösung für eine sichere Injektion



BD SafetyGlide™ Sicherheitsinjektionskanülen mit Activation-Assist™-Technologie

BD SafetyGlide Sicherheitsinjektionskanülen tragen zur Vermeidung versehentlicher Nadelstichverletzungen bei. Gleichzeitig wird die Effizienz der Arbeitsabläufe nicht beeinträchtigt.


Die klinische Anwendungstechnik kann unverändert beibehalten werden, der Schulungsbedarf für den Anwender ist äußerst gering.



Eine Studie in einem Krankenhaus ergab, dass die Anzahl der gemeldeten Nadelstichverletzungen aufgrund des Einsatzes von BD SafetyGlide™ Kanülen und BD™ Blunt Fill stumpfen Aufziehkanülen zusammen mit Anwenderschulungen und Trainings signifikant von 16.9 auf 6 / 100.000 Produkten gesenkt werden konnte¹.

Durch die **Activation-Assist™-Technologie** kann der Sicherheitsmechanismus schnell und einfach – nur mit einer Hand – aktiviert werden.

Der Sicherheitsmechanismus über der Kanüle ist aus **rostfreiem Stahl**. Nach Aktivierung des Sicherheitsmechanismus ist die Kanüle sicher geschützt.

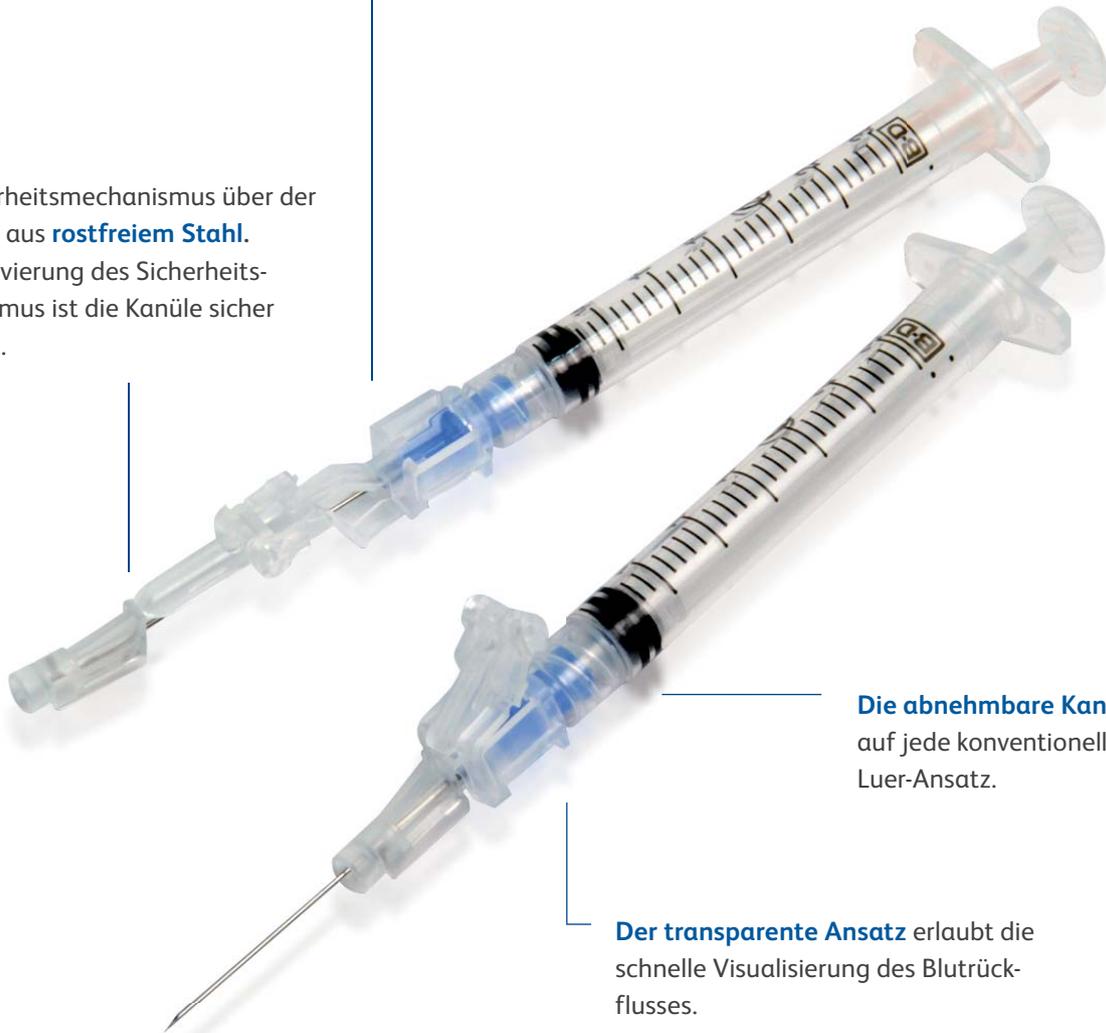

Die **abnehmbare Kanüle** passt auch auf jede konventionelle Spritze mit Luer-Ansatz.

Der **transparente Ansatz** erlaubt die schnelle Visualisierung des Blutrückflusses.

Durch die **Ausrichtung des Kanüenschliffs zum Sicherheitmechanismus** ist immer ein optimaler Punktionswinkel gewährleistet.

Unser Tipp:

Entsorgen Sie Spritzen und Kanülen nach Gebrauch in einen geeigneten Kanülenabwurfbehälter. Wir empfehlen Ihnen unsere BD™ Sharps Container Entsorgungssysteme.

Produktinformationen

BD SafetyGlide™ Sicherheitsinjektionskanülen mit Activation-Assist™-Technologie						
Produkt-Nr.	PZN*	Kanülenmaße (G)	Außendurchmesser (mm)	Länge (mm)	Farbe	VE / UK**
305921	8848184	27 5/8"	0,4	16	grau	50 / 500
305901	8848161	25 5/8"	0,5	16	orange	50 / 500
305916	8848178	25 1"	0,5	25	orange	50 / 500
305902	8848155	23 1"	0,6	25	blau	50 / 500
305900	8848132	22 1 1/2"	0,7	40	schwarz	50 / 500
305915	8848126	21 1"	0,8	25	grün	50 / 500
305917	8848149	21 1 1/2"	0,8	40	grün	50 / 500
305918	8848190	18 1 1/2"	1,2	40	rosa	50 / 500

* PZN: Pharmazentralnummer (gültig nur für Deutschland)

** VE / UK = Verpackungseinheit / Umkarton

1 Adams D, Elliott TS. Impact of safety needles devices on occupationally acquired needlestick injuries: A four-year prospective study. J Hosp Infect. 2006. Sept;64(1):50-5.

Deutschland: BD · Tullastr. 8 – 12 · 69126 Heidelberg · Tel. 06221 305 0
Österreich: BD · Rinnböckstr. 3 · 1030 Wien · Tel. 01 7063660 0
Schweiz: BD · Binnergerstrasse 94 · 4123 Allschwil · Tel. 061 485 22 22

bd.com

